

All copy and logo's print 100% black unless stated

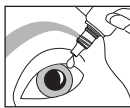
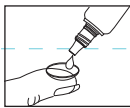
blink

contacts®

TOP FRONT

soothing eye drops

10ml

(EN) Refreshment for contact lens wearers from dry, tired eyes

Specifically formulated for contact lens wearers this gentle and highly effective eye drop soothes and refreshes dry, tired eyes. Suitable for all contact lenses without the need to remove your lenses first.

Instructions for use

- Place 1 or 2 drops in affected eye as required
- Blink several times to wash the eye
- Use as often as required
- No need to remove your lenses
- For extra comfort place 1 or 2 drops on each lens before inserting

For use with all types of contact lenses.

Precautions

- Do not use if the tamper-evident seal is broken or missing
- Do not swallow the solution
- Do not use if allergic to any of the ingredients
- To avoid contamination do not touch bottle tip on any surface and avoid contact with eyes
- Close the bottle tightly immediately after use
- Do not use after the expiry date
- Keep out of the reach of children
- Store between 5°C and 25°C
- Do not rinse your lenses in tap water
- Discard any remaining solution 45 days after first opening the bottle

If you have continued problems please discuss with your eye care professional.

Contains:

Sodium hyaluronate - 0.15%
 OcuPure® preservative - 0.005%
 Calcium chloride (dihydrate)
 Potassium chloride
 Sodium chloride
 Borate buffer
 Magnesium chloride
 Purified water

Symbols

Consult instructions for use	Manufacturer	5°C - 25°C Temperature limitation
STERILE A Sterile-Aseptic technique	LOT Batch code	Discard any remaining solution 45 days after first opening the bottle
Do not use if package is damaged	Use by	

CE 0123 STERILE A

AMO Ireland
 Block B, Liffey Valley Office Campus
 Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
 blink, blink contacts and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
 © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., 2018

CE mark size/proportions complies with European Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex XII

blink

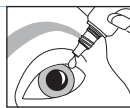
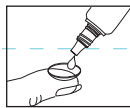
contacts®

TOP BACK

gotas humectantes

gotas calmantes para os olhos

10ml

(ES) Alivio para los ojos secos y cansados de los usuarios de lentes de contacto

Estas gotas humectantes suaves pero de gran eficacia, específicamente formuladas para usuarios de lentes de contacto, calman y alivian los ojos secos y cansados. Adecuadas para todas las lentes de contacto sin necesidad de quitárselas primero.

Instrucciones de uso

- Instile 1 ó 2 gotas en el ojo afectado según sea necesario
- Parpadee varias veces para lavar el ojo
- Se puede usar con tanta frecuencia como sea necesario
- No es necesario que se quite las lentes de contacto
- Para mayor comodidad, instile 1 ó 2 gotas en cada lente antes de ponérselas

Para uso con todo tipo de lentes de contacto.

Precauciones

- No usar si no tiene el precinto de seguridad o está roto
- No ingerir la solución
- No use el producto si es alérgico a alguno de los ingredientes
- Para evitar la contaminación, no toque ninguna superficie con la punta del frasco y evite el contacto con los ojos
- Cerrar bien el frasco inmediatamente después de su uso
- No use el producto después de la fecha de caducidad
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Conservar entre 5 °C y 25 °C
- No aclare las lentes de contacto con agua del grifo
- Deseche toda la solución restante 45 días después de haber abierto el frasco por primera vez

Si tuviera problemas persistentes, por favor, consulte con un especialista.

Contiene:

Hialuronato sódico al - 0,15%
 OcuPure® conservante al - 0,005%
 Cloruro de calcio (dihidratado)
 Cloruro potásico
 Cloruro sódico
 Tampón de borato
 Cloruro de magnesio
 Agua destilada

(PT) Alívio da sensação de olhos secos e cansados para utilizadores de lentes de contacto

Formuladas especificamente para utilizadores de lentes de contacto, estas gotas suaves e altamente eficazes acalmam e aliviam os olhos secos e cansados. Adequadas para todos os tipos de lentes de contacto sem necessidade de retirar primeiro as suas lentes.

Instruções de utilização

- Coloque 1 ou 2 gotas no olho afetado, conforme o necessário
- Pestaneje várias vezes para lavar o olho
- Pode ser utilizado tão frequentemente quanto o necessário
- Não é necessário retirar as suas lentes
- Para obter um conforto adicional, coloque 1 ou 2 gotas em cada uma das lentes antes de colocá-las

Para utilização com todos os tipos de lentes de contacto.

Precauções

- Não utilize se o selo de inviolabilidade estiver quebrado ou ausente
- Não engula a solução
- Não utilize se for alérgico a qualquer um dos ingredientes
- Para evitar a contaminação, não deixe que a extremidade do frasco toque em nenhuma superfície e evite o contacto com os olhos
- Feche bem o frasco imediatamente após a utilização
- Não utilize após a data de validade
- Manter fora do alcance das crianças
- Conservar entre os 5°C e os 25°C
- Não enxague as suas lentes com água da torneira
- Elimine quaisquer restos de solução 45 dias após a primeira abertura do frasco

Se tiver problemas persistentes, discuta-os com o seu profissional de cuidados oculares.

Contém:

Hialuronato de sódio a - 0,15%
 OcuPure® conservante - 0,005%
 Cloreto de cálcio (di-hidratado)
 Cloreto de potássio
 Cloreto de sódio
 Tampão de borato
 Cloreto de magnésio
 Água purificada

Símbolos

Consulte las instrucciones de uso Consultar as instruções de utilização	Fabricante Fabricante	5°C - 25°C Limitación de temperatura Limitação de temperatura
STERILE A Estéril-Técnica aséptica Estéril-Técnica aséptica	LOT Código del lote Código do lote	Deseche toda la solución restante 45 días después de haber abierto el frasco por primera vez Elimine quaisquer restos de solução 45 dias após a primeira abertura do frasco
No utilizar si el paquete está dañado Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Usar antes de Usar antes de	

AM70477AK13D
 Revision Date: 04/2018
 XXXXXX XX

10ml INSERT (AUTO)
 207mm x 117mm
 AM01194

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

<i>DC • Labeling & Packaging</i>																			
Artwork Specifications																			
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																		
Last Update: 17/04/2018 - 11.30 v1																			
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center; font-size: 8px;">INK(S)</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	INK(S)													BLACK				
INK(S)																			
				BLACK															