


FRONT COPY

TEXT DIRECTION

blink[®]
intensive
soothing eye drops
20 x 0.4ml

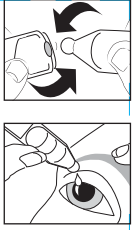

(EN) Long lasting relief from the feeling of dry, tired eyes
An advanced lubricating eye drop specifically formulated to provide soothing comfort for eyes that are dry, irritated, or uncomfortable.

Indications
Irritated, uncomfortable eyes. May be used with contact lenses.

Contraindications
No known contraindications.

Instructions for use

- Place 1 or 2 drops in affected eye as required
- Blink several times to wash the eye
- Use as often as required
- If you wear contact lenses there is no need to remove them

Precautions

- Always use fresh solution
- Do not use if unit dose container is damaged
- Do not swallow the solution
- Do not use if allergic to any of the ingredients
- To avoid contamination do not touch container tip on any surface and avoid contact with eyes
- Do not use after the expiry date
- Keep out of the reach of children
- Store between 5°C and 25°C
- Discard the container and any remaining solution immediately after use
- Potential risks, side effects or complications generally associated with eye drops are:
Allergic reaction, inflammatory reaction or infections

If you have continued problems please discuss with your eye care professional.

Side Effects
No known side effects.

Contains:
Polyethylene glycol 400 (PEG 400) – 0.25%
Sodium hyaluronate – 0.20%
Boric acid
Sodium borate (decahydrate)
Sodium chloride
Potassium chloride
Calcium chloride (dihydrate)
Magnesium chloride
Purified water

Symbols

	Consulte las instrucciones de uso Consultar instruções de uso		Fabricante		Número de lote Número de lote		Fecha de caducidad Data de validade		Limite de temperatura Limite de temperatura
	ESTÉRIL. Técnica aséptica Estéril. Técnica asséptica		No reutilizar Não reutilizar		No utilizar si el paquete está dañado Não utilizar se a embalagem estiver danificada				

CE 0123 **STERILE A**


AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH
EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE
93/42/EEC Annex XII.

BACK COPY ISSUED

TEXT DIRECTION

blink[®]
intensive
gotas oculares calmantes
gotas oftalmológicas calmantes
20 x 0.4ml

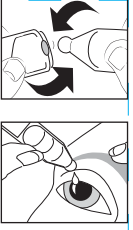

(ES) Alivio duradero de la sensación de sequedad y cansancio ocular
Gotas oculares calmantes formuladas específicamente para proporcionar un alivio reconfortante para los ojos secos, irritados o con molestias.

Indicaciones
Ojos cansados e irritados. Se puede usar con lentes de contacto.

Contraindicaciones
No hay contraindicaciones conocidas.

Instrucciones de uso

- Instile 1 o 2 gotas en el ojo afectado según sea necesario
- Parpadee varias veces para lavar el ojo
- Use el producto con tanta frecuencia como sea necesario
- Si tiene puestas las lentes de contacto, no es necesario que se las quite

Precauciones

- Use siempre una solución reciente
- No use el producto si el envase de la dosis unitaria está dañado
- No ingiera la solución
- No use el producto si es alérgico a alguno de los ingredientes
- Para evitar la contaminación, no toque ninguna superficie con la punta del envase ni la ponga en contacto directo con los ojos
- No use el producto después de la fecha de caducidad
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- Mantener el producto a una temperatura entre 5°C y 25°C
- Deseché el recipiente y la solución restante inmediatamente después del uso
- Los riesgos, efectos secundarios o complicaciones posibles asociados generalmente a las gotas oculares son: reacción alérgica, reacción inflamatoria o infecciones

Si las molestias persisten, por favor, consulte al especialista.

Efectos secundarios
No hay efectos secundarios conocidos.

Contiene:
Polietilenglicol 400 (PEG 400) – 0,25 %
Hialuronato de sodio – 0,20 %
Ácido bórico
Borato sódico (decahidratado)
Cloruro sódico
Cloruro potásico
Cloruro de calcio (dihidratado)
Cloruro de magnesio
Agua purificada

(PT) Alívio de longa duração para a sensação de olhos secos e cansados
Uma gota oftalmológica lubrificante avançada, especificamente formulada para proporcionar conforto calmante aos olhos que estão secos, irritados ou cansados.

Indicações
Olhos cansados e irritados. Pode usar-se com lentes de contacto.

Contra-indicações
Desconhecem-se.

Instruções de utilização

- Coloque 1 ou 2 gotas no olho afectado, conforme o necessário
- Pisque os olhos várias vezes para lavar o olho
- Use tão frequentemente quanto o necessário
- Se utilizar lentes de contacto, não há necessidade de as retirar

Precauções

- Utilizar sempre solução nova
- Não utilizar se a embalagem da dose individual estiver danificada
- Não ingerir a solução
- Não utilizar se for alérgico a qualquer um dos ingredientes
- Para evitar a contaminação, não deixe que a extremidade da embalagem toque em nenhuma superfície nem contacte directamente com o olho
- Não utilizar após a data de validade
- Manter fora do alcance das crianças
- Conservar entre 5°C e 25°C
- Eliminar a embalagem e qualquer resto de solução imediatamente após a utilização
- Os potenciais, riscos, efeitos secundários ou complicações geralmente associados a gotas oftalmológicas são: reacção alérgica, reacção inflamatória ou infeções

Se tiver problemas persistentes, discuta-os com o seu profissional de cuidados oftalmológicos.

Efeitos secundários
Desconhecem-se.

Contém:
Polietilenglicol 400 (PEG 400) – 0,25%
Hialuronato de sódio – 0,20%
Ácido bórico
Borato de sódio (decahidratado)
Cloreto de sódio
Cloreto de potássio
Cloreto de cálcio (dihidratado)
Cloreto de magnésio
Água purificada

Símbolos

	Consulte las instrucciones de uso Consultar instruções de uso		Fabricante		Número de lote Número de lote		Fecha de caducidad Data de validade		Limite de temperatura Limite de temperatura
	ESTÉRIL. Técnica aséptica Estéril. Técnica asséptica		No reutilizar Não reutilizar		No utilizar si el paquete está dañado Não utilizar se a embalagem estiver danificada				

AM70507AX12D
Revision Date: 05/2018

INSERT 240mm x 140mm
(HOLOPACK)
PENCIL FOLD

AM01699

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging																									
Artwork Specifications																									
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																								
Last Update: 03/05/2018 - 10.00 v1																									
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INK(S)</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									INK(S)											BLACK				
INK(S)																									
			BLACK																						