


All copy and logo's print 100% black unless stated

**blink®**  
**intensive**  
soothing eye drops  
10ml

**TOP FRONT**

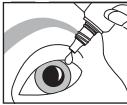

**(EN)** Long lasting relief from the feeling of dry, tired eyes

An advanced lubricating eye drop specifically formulated to provide soothing comfort for eyes that are dry, irritated, or uncomfortable.

**Indications**  
Irritated, uncomfortable eyes. May be used with contact lenses.

**Contraindications**  
No known contraindications.

**Instructions for use**

- Place 1 or 2 drops in affected eye as required
- Blink several times to wash the eye
- Use as often as required
- If you wear contact lenses there is no need to remove them

**Precautions**

- Do not use if the tamper-evident seal is broken or missing
- Do not swallow the solution
- Do not use if allergic to any of the ingredients
- To avoid contamination do not touch bottle tip on any surface and avoid contact with eyes
- Do not use after the expiry date
- Keep out of the reach of children
- Store between 5°C to 25°C
- Discard any remaining solution 45 days after first opening the bottle
- Potential risks, side effects or complications generally associated with eye drops are: allergic reaction, inflammatory reaction or infections

If you have continued problems please discuss with your eye care professional.

**Side Effects**  
No known side effects.

**Contains:**  
Polyethylene glycol 400 (PEG 400) – 0,25%  
OcuPure® preservative (sodium chlorite)  
Sodium hyaluronate – 0,20%  
Boric acid  
Sodium borate (decahydrate)  
Sodium chloride  
Potassium chloride  
Calcium chloride (dihydrate)  
Magnesium chloride  
Purified water

**PAGE 1**

**Symbols**


Consult instructions for use	Manufacturer	25°C Temperature limitation	
<b>STERILE A</b> Sterile, Aseptic technique	<b>LOT</b> Batch code	5°C	
Do not use if package is damaged	Use by	45D	Discard any remaining solution 45 days after first opening the bottle

**CE 0123** **STERILE A**

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co Dublin, Ireland  
blink and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., 2018

**blink®**  
**intensive**  
gotas oculares calmantes/gotas oftalmológicas calmantes  
10ml

**TOP BACK**

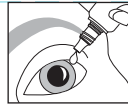

CODE 128

**(ES)** Alivio duradero de la sensación de sequedad y cansancio ocular

Gotas oculares calmantes formuladas especialmente para proporcionar un alivio reconfortante para los ojos secos, irritados o con molestias.

**Indicaciones**  
Ojos cansados e irritados. Se pueden usar con lentes de contacto.

**Contraindicaciones**  
No hay contraindicaciones conocidas.

**Instrucciones de uso**

- Instile 1 ó 2 gotas en el ojo afectado según sea necesario
- Papadee varias veces para lavar el ojo
- Use el producto con tanta frecuencia como sea necesario
- Si tiene puestas las lentes de contacto, no es necesario que se las quite

**Precauciones**

- No use el producto si falta el precinto de seguridad o está roto
- No ingiera la solución
- No use el producto si es alérgico a alguno de los ingredientes
- Para evitar la contaminación, no toque ninguna superficie con la punta del envase ni la ponga en contacto directo con los ojos
- No use el producto después de la fecha de caducidad
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- Mantenga el producto a una temperatura entre 5 °C y 25 °C
- Deseche la solución restante 45 días después de abrir el envase por primera vez
- Los riesgos, efectos secundarios o complicaciones posibles asociados generalmente a las gotas oculares son: reacción alérgica, reacción inflamatoria o infecciones

Si las molestias persisten, por favor, consulte al especialista.

**Efectos secundarios**  
No hay efectos secundarios conocidos.

**Contiene:**  
Polietilenglicol 400 (PEG 400) – 0,25%  
Conservante OcuPure® (clorito sódico)  
Hialuronato de sodio – 0,20%  
Ácido bórico  
Borato sódico (decahidratado)  
Cloruro sódico  
Cloruro potásico  
Cloruro de calcio (dihidratado)  
Cloruro de magnesio  
Agua purificada

**PAGE 2**

**(PT)** Alívio de longa duração da sensação de olhos secos e cansados

Uma gota oftalmológica lubrificante avançada, especificamente formulada para proporcionar conforto calmante aos olhos que estão secos, irritados ou cansados.

**Indicações**  
Olhos cansados e irritados. Podem ser utilizadas com lentes de contacto.

**Contra-indicações**  
Desconhecem-se.

**Instruções de utilização**

- Coloque 1 ou 2 gotas no olho afectado, conforme o necessário
- Pisque os olhos várias vezes para lavar o olho
- Use tão frequentemente quanto o necessário
- Se usar lentes de contacto, não há necessidade de as retirar

**Precauções**

- Não utilizar se o selo de inviolabilidade estiver quebrado ou ausente
- Não ingerir a solução
- Não utilizar se for alérgico a qualquer um dos ingredientes
- Para evitar a contaminação, não deixe que a extremidade da embalagem toque em qualquer superfície e evite o contacto directo com o olho
- Não utilizar após o prazo de validade
- Manter fora do alcance das crianças
- Conservar entre 5°C e 25°C
- Eliminar qualquer solução restante 45 dias após a primeira abertura do frasco
- Os possíveis riscos, efeitos secundários ou complicações geralmente associados a gotas oftálmicas são: reacção alérgica, reacção inflamatória ou infeções

Se tiver problemas persistentes, discuta-os com o seu profissional de cuidados oftalmológicos.

**Efeitos secundários**  
Desconhecem-se.

**Contém:**  
Polietilenglicol 400 (PEG 400) – 0,25%  
OcuPure® conservante (clorito de sódio)  
Hialuronato de sódio – 0,20%  
Ácido bórico  
Borato de sódio (decahidratado)  
Cloreto de sódio  
Cloreto de potássio  
Cloreto de cálcio (dihidratado)  
Cloreto de magnésio  
Água purificada

**Símbolos:**

Consulte las instrucciones de uso Consultar as instruções de utilização	Fabricante	25°C Limite de temperatura	
<b>STERILE A</b> Estéril. Técnica aséptica	<b>LOT</b> Número de lote	5°C	
No utilizar si el embalaje está dañado Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Fecha de caducidad Prazo de validade	45D	Deseche la solución restante 45 días después de abrir el envase por primera vez Eliminar qualquer solução restante 45 dias após a primeira abertura do frasco

AM70243AX12D  
Revision Date: 04/2018

**XXXXXX XX**

10ml INSERT (AUTO)  
207mm x 117mm  
AM01194

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH  
EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE  
93/42/EEC Annex XII.

**ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK**

<b>DC • Labeling &amp; Packaging</b>																
<b>Artwork Specifications</b>																
<b>Platform:</b> MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.															
<b>Last Update:</b> 17/04/2018 - 12.00 v1																
<b>Note:</b> This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.																
<b>INK(S)</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">BLACK</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													BLACK		
		BLACK														